

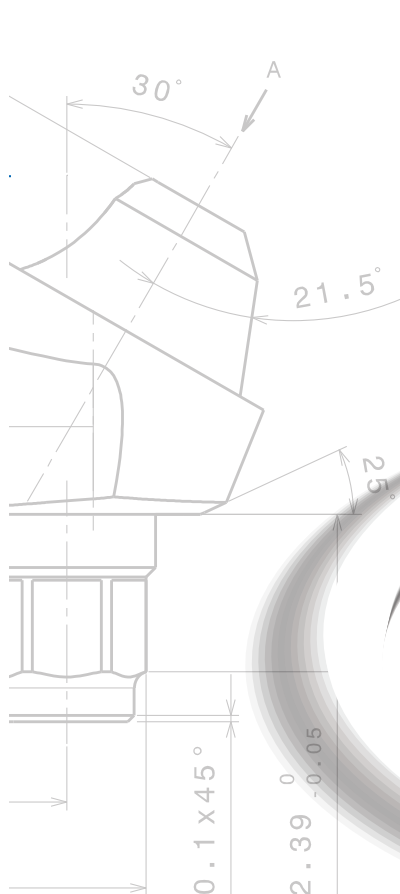
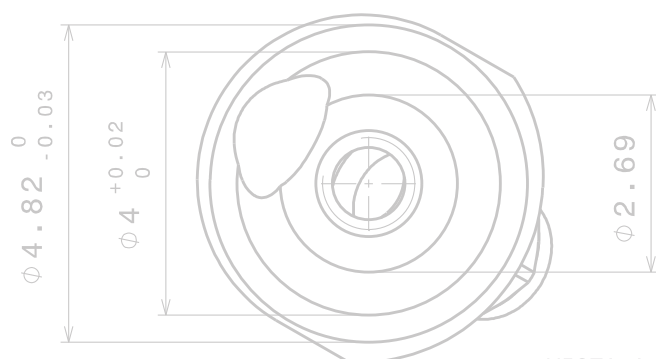


Dettaglio C
Scala: 20:1

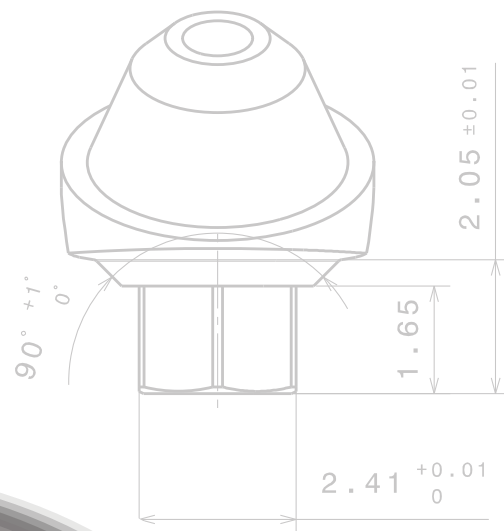


VISTA A

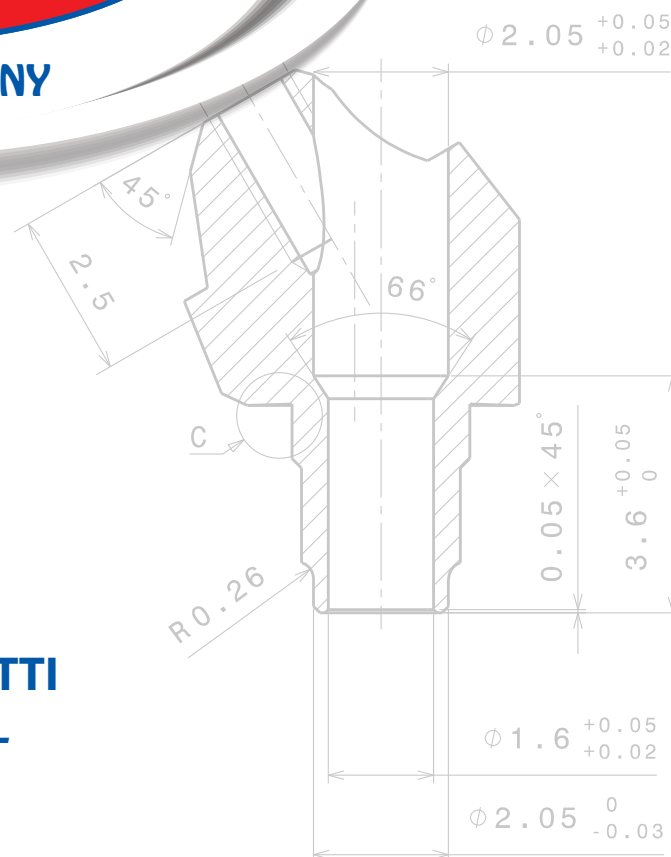

ELENCO PRODOTTI

PRODUCT LIST

2019

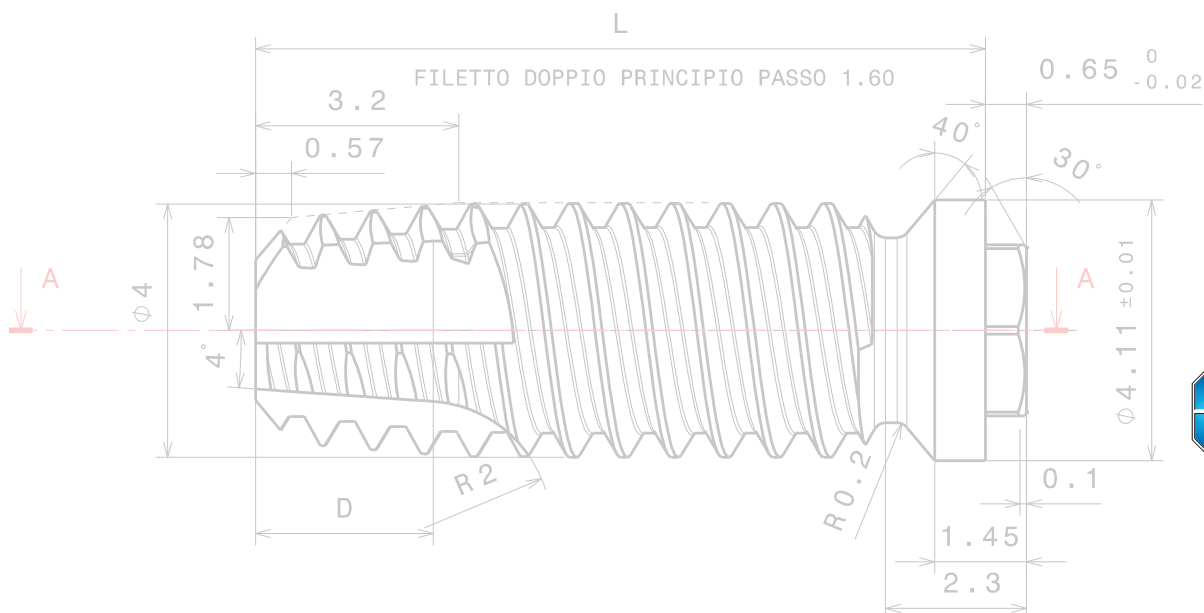

Certificati	4	Certificates
Guida Viti protesiche	6	Prosthetic screws Guide

IMPIANTI DENTALI

DENTAL IMPLANTS

ONE (esagono esterno)	9	ONE (external hex)
ACTIVE (Esagono interno)	11	ACTIVE (Internal hexagon)
KO-INN (Esagono interno)	13	KO-INN (Internal hexagon)
S-INN (Esagono interno)	15	S-INN (Internal hex)
TWO (esagono interno)	17	TWO (internal hex)
Kit Chirurgico	19	Surgical Kit
Accessori Kit Chirurgico	20	Accessories Surgical Kit

ACCESSORI COMPATIBILI

COMPATIBLE ACCESSORIES

Astra Tech® (esagono interno conico)	22	Astra Tech® (internal hex conic)
Biomet 3i® (esagono esterno)	25	Biomet 3i® (external hex)
Biomet 3i Certain® (esagono interno)	30	Biomet 3i Certain® (internal hex)
Frialit Xive® (esagono interno)	35	Frialit Xive® (internal hex)
Leone® (esagono interno)	38	Leone® (internal hex)
Lifecore Prima Connex® (esagono interno)	40	Lifecore Prima Connex® (internal hex)
Neoss® (esagono interno)	42	Neoss® (internal hex)
Nobel Active® (esagono interno conico)	44	Nobel Active® (internal hex conic)
Nobel Branemark® (esagono esterno)	49	Nobel Branemark® (external hex)
Nobel Replace® (Trilobato)	54	Nobel Replace® (Trilobat)
Premium Kohno® (esagono interno)	59	Premium Kohno® (internal hex)
Screw-vent® (esagono interno)	64	Screw-vent® (internal hex)
Straumann Bone level® (esagono interno)	69	Straumann Bone level® (internal hex)
Straumann Tissue Level® (ottagono interno)	72	Straumann® (internal octagon)

Fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento

Out of production, accessories available to end of stock

Camlog® (esagono interno)	75	Camlog® (internal hex)
Global® (esagono interno)		Global® (internal hex)
Winsix® (esagono interno)		Winsix® (internal hex)
Astra Tech® ø30 (esagono interno conico)		Astra Tech® ø30(internal hex conical)

CERTIFICATO
N° Q5 084091 0004 Rev. 00

Titolare del certificato: Dental Planet
Di Barozzini Marco & C. S.A.S.
Via Imola, 90/B
41125 Modena
ITALIA

Stabilimento(i): Dental Planet Di Barozzini Marco & C. S.A.S.
Via Imola, 90/B, 41125 Modena, ITALIA

Marchio di certificazione: 

Campo di applicazione: Progettazione e sviluppo, produzione e distribuzione di impianti dentali e monconi. Distribuzione di strumenti per impianti dentali

Norma(e) applicata(e): EN ISO 13485:2016
Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari (ISO 13485:2016)
DIN EN ISO 13485:2016

L'Organismo di Certificazione TÜV SÜD Product Service GmbH certifica che la società sopramenzionata ha istituito e mantiene un sistema di gestione qualità conforme ai requisiti della(e) norma(e) elencata(e). Vedere anche note sul retro.

N° del rapporto: ITA853743

Valido da: 2018-10-11
Valido fino al: 2020-03-31

Data, 2018-10-11 
Stefan Preis

Pagina 1 di 1
Traduzione per scopi informativi. La sola versione inglese è legalmente impegnativa.

TUV®

Certificate
No. Q5 084091 0004 Rev. 00

Holder of Certificate: Dental Planet
di Barozzini Marco & C. S.A.S.
Via Imola, 90/B
41125 Modena
ITALY

Facility(ies): Dental Planet di Barozzini Marco & C. S.A.S.
Via Imola, 90/B, 41125 Modena, ITALY

Certification Mark: 

Scope of Certificate: Design and development, production and distribution of dental implants and abutments. Distribution of instruments for surgical dental implant

Applied Standard(s): EN ISO 13485:2016
Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)
DIN EN ISO 13485:2016

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system, which meets the requirements of the listed standard(s). See also notes overleaf.

Report No.: ITA853743

Valid from: 2018-10-11
Valid until: 2020-03-31

Date, 2018-10-11 
Stefan Preis

Page 1 of 1
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TUV®

CERTIFICATO CE
Sistema completo di garanzia di qualità
Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (DDM), allegato II escluso (4)
(dispositivi in classe IIa, IIb o III)
N° G1 084091 0005 Rev. 00

Fabbricante: Dental Planet
Di Barozzini Marco & C. S.A.S.
Via Imola, 90/B
41125 Modena
ITALIA

Stabilimento(i): Dental Planet Di Barozzini Marco & C. S.A.S.
Via Imola, 90/B, 41125 Modena, ITALIA

Categoria(e) di prodotti: Impianti dentali e accessori per impianti dentali
(monconi, viti di guarigione e viti di connessione)

Con il presente certificato, l'organismo notificato di TÜV SÜD Product Service GmbH certifica che il fabbricante sopra menzionato ha implementato un sistema di garanzia di qualità per la progettazione, la fabbricazione ed il controllo finale dei dispositivi / delle categorie di dispositivi in questione, secondo quanto stabilito nella direttiva DDM, allegato II. Questo sistema di qualità risponde ai requisiti della presente direttiva ed è soggetto a sorveglianza regolari. Per l'immissione sul mercato di dispositivi della classe III, è richiesto un certificato addizionale di cui all'allegato II (4). Osservare le note riportate sul retro.

N° del rapporto: ITA1184834

Valido da: 2019-01-04
Valido fino al: 2024-03-31

Data, 2019-03-21
S. Preis
Stefan Preis

TÜV SÜD PRODUCT SERVICE GMBH è Organismo Notificato con numero identificativo 0123.

Pagina 1 di 1
Traduzione per scopi informativi. La sola versione inglese è legalmente impegnativa.

TÜV®

EC Certificate
Full Quality Assurance System
Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex II excluding (4)
(Devices in Class IIa, IIb or III)
No. G1 084091 0005 Rev. 00

Manufacturer: Dental Planet
di Barozzini Marco & C. S.A.S.
Via Imola, 90/B
41125 Modena
ITALY

Facility(ies): Dental Planet di Barozzini Marco & C. S.A.S.
Via Imola, 90/B, 41125 Modena, ITALY

Product Category(ies): Dental Implants and accessories
for dental implant
(abutment, healing and connection screws)

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH declares that the aforementioned manufacturer has implemented a quality assurance system for design, manufacture and final inspection of the respective devices / device categories in accordance with MDD Annex II. This quality assurance system conforms to the requirements of this Directive and is subject to periodical surveillance. For marketing of class III devices an additional Annex II (4) certificate is mandatory. See also notes overleaf.

Report No.: ITA1184834

Valid from: 2019-04-01
Valid until: 2024-03-31

Date, 2019-03-21
S. Preis
Stefan Preis

Page 1 of 1
TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Rüdigerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®

AZIENDA / COMPANY	DIAMETRO DIAMETER	CODICE CODE	FILETTATURA THREAD	SERRAGGIO TIGHTENING	DRIVER DRIVER
ASTRA TECH®	ø 3,0 ø 3,5/4,0 ø 4,5/5,0	DP-13/A3 DP-13/A4 DP-13/A5	M1,4 M1,6 M2,0	15Ncm 20Ncm 25Ncm	1,27
BIOMAX 3i®	ø 3,25/4,0/5,0	DP-13	M2,0	25Ncm	1,20
BIOMAX 3i® CERTAIN®	ø 3,25/4,1/5,0	DP-13C	M1,6	20Ncm	1,20
CAMLOG®	ø 3,8/4,3	DP-13CA4	M1,6	20Ncm	1,20
FRIALIT XIVE®	ø 3,4/3,8/4,5	DP-13FR	M1,6	20Ncm	1,20
GLOBAL®	ø 3,8/4,3	DP-13G	M1,8	25Ncm	1,27
LIFECORE® PRIMA CONNEX®	ø 3,5/4,1/5,0	DP-13LF	M1,8	25Ncm	Quadro
NEOSS®	ø 4,1	DP-13NE	M2,0	25Ncm	TORX
NOBEL ACTIVE®	ø 3,5 ø 4,3/5,0	DP-13NA3 DP-13NA4	M1,6 M2,0	20Ncm 25Ncm	TORX
NOBEL BRANEMARK®	ø 3,50 ø 4,0 ø 5,0	DP-13NT DP-13T DP-13WT	M1,6 M2,0 M2,5	20Ncm 25Ncm 35Ncm	TORX
NOBEL REPLACE®	ø 3,5 ø 4,3/5,0	DP-13NRT DP-13RT	M1,8 M2,0	25Ncm 25Ncm	TORX
PREMIUM KOHNO®	ø 3,3/3,8 ø 4,25/5,0	DP-13K3 DP-13K4	M1,8 M2,0	25Ncm 25Ncm	1,27
SCREW-VENT®	ø 3,3 ø 3,5/4,5	DP-13MS3 DP-13I	M1,6 M1,8	20Ncm 25Ncm	1,27
STRAUMANN® BONE LEVEL®	ø 3,3/4,7	DP-13BOL	M1,6	20Ncm	TORX
STRAUMANN® TISSUE LEVEL	ø 4,8	MAXX5016	M2,0	25Ncm	TORX
WINSIX®	ø 3,3/3,8/4,5	DP-13WIN	M2,0	25Ncm	1,27

AZIENDA / COMPANY	DIAMETRO DIAMETER	CODICE CODE	FILETTATURA THREAD	SERRAGGIO TIGHTENING	DRIVER DRIVER
Viti Mua Angolati					
BIOMAX 3i® CERTAIN®	ø 3,25/4,1	DP-13C-MUA	M1,6	20Ncm	1,20
NOBEL ACTIVE®	ø 3,5 ø 4,3/5,0	DP-13NA3/MU DP-13NA4/MU	M1,6 M2,0	20Ncm 25Ncm	TORX
NOBEL BRANEMARK®	ø 4,1	DP-77/D	M2,0	25Ncm	TORX
NOBEL REPLACE®	ø 3,5 ø 4,3/5,0	DP-13NT/MU DP-13RT/MU	M1,8 M2,0	25Ncm 25Ncm	TORX
PREMIUM KOHNO®	ø 3,8 ø 4,25	DP-13K3-MUA DP-13K4-MUA	M1,8 M2,0	25Ncm 25Ncm	1,27
SCREW-VENT®	ø 3,5	DP-13I-MUA	M1,8	25Ncm	1,27
Viti Sovrastrutture Mua					
ASTRA TECH®	ø 3,5/4,0/4,5/5	DP-13/A MUA	M1,4	15Ncm	1,27
3i® CERTAIN®	ø 3,25/4,1	DP-77/T	M1,4	15Ncm	TORX
NOBEL ACTIVE®	ø 3,5/4,3				
NOBEL BRANEMARK®	4,0				
NOBEL REPLACE®	ø 3,5/4,3				
SCREW-VENT®	ø 3,5				
PREMIUM KOHNO®	ø 3,8/4,25	DP-13KV	M1,4	15Ncm	1,27


IMPIANTI DENTALI COMPATIBILI

COMPATIBLE DENTAL IMPLANTS



ONE

esagono esterno
external hex

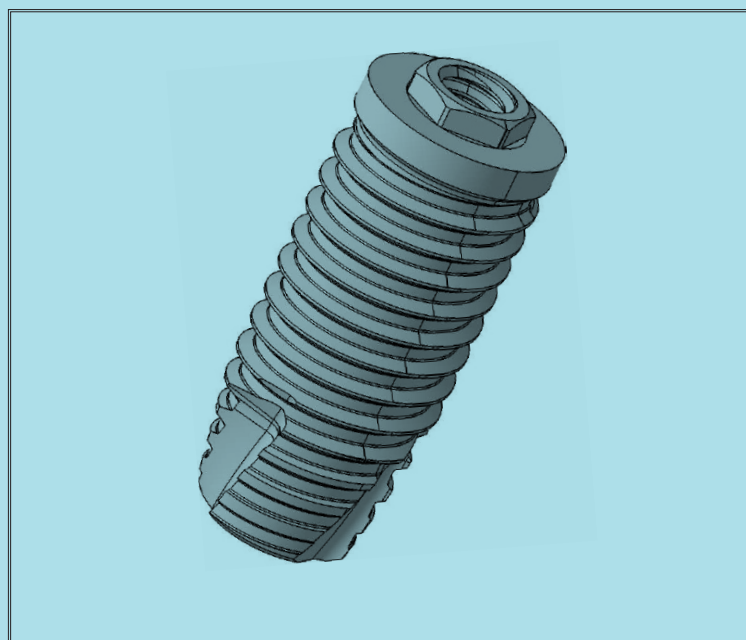

PROPRIETÀ

Connessione ad esagono esterno
Corpo cilindrico con apice leggermente conico
Collare macchinato
Trattamento superficiale tipo S.L.A.

Grazie al suo disegno e all'apice tagliente che consente la sottopreparazione e l'ancoraggio bicorticale, l'impianto consente di ottimizzare la stabilità primaria e sostenere i protocolli di carico immediato.
Ideale per osso da medio a morbido

Ogni confezione è composta da:

- Una busta alluminio contenente l'impianto con montatore in titanio utilizzabile come transfert o moncone definitivo.
- Una vite tappo
- Un foglietto illustrativo
- Etichetta paziente da applicare al passaporto implantare

PROPERTY

External hex connection
Cylindrical body with a slightly conical top
Worked neck
Surface treatment type S.L.A.

Thanks to his design and sharp apex that it allows underproduction and bicortical anchorage, the implant optimizes primary stability and support immediate loading protocols.
Ideal for medium to soft bone

Each package consists of:

- An aluminum envelope containing the implant with titanium mounter used as a transfer or final abutment.
- A screw cap
- A leaflet
- Patient label to apply to the implant passport



	Compatibile Branemark® Branemark® Compatible			Compatibile 3i® 3i® Compatible
Lunghezza Lenght	∅ 3,30 codice/code	∅ 3,75 codice/code	∅ 4,0 codice/code	∅ 5,0 codice/code
7	---	---	ONE4007	---
8	---	ONE3708	ONE4008	ONE5008
10	ONE3310	ONE3710	ONE4010	ONE5010
11,5	ONE3311	ONE3711	ONE4011	ONE5011
13	ONE3313	ONE3713	ONE4013	ONE5013
15	---	ONE3715	---	---


Accessori protesici compatibili guardare a pag. 25 - 49

Compatible prosthetic accessories see page 25 - 49

ACTIVE

esagono interno

internal hex

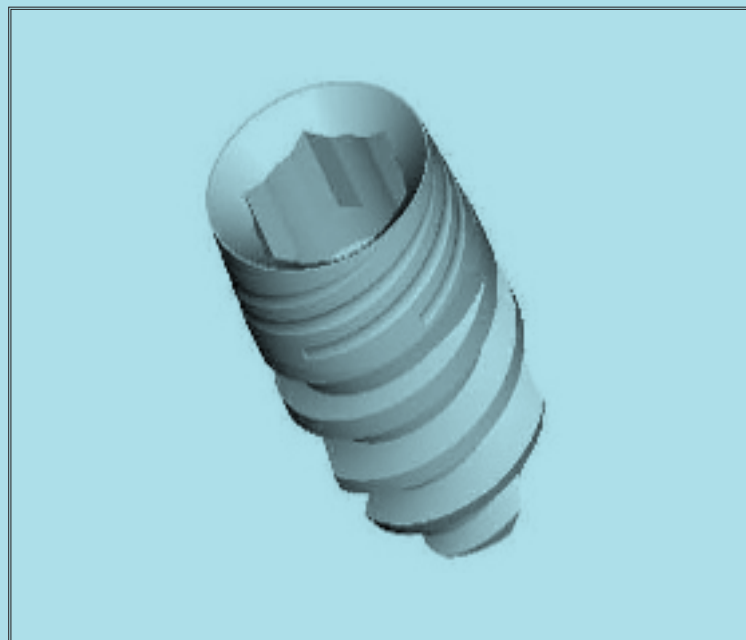

PROPRIETÀ

Connessione esagono interno
Corpo conico dell'impianto, cilindrico della spira
collare trattato con conicità inversa
Trattamento superficiale tipo S.L.A.

L'impianto ha una doppia filettatura che favorisce la graduale condensazione dell'osso e un'ottima stabilità primaria
La parte coronale con conicità inversa aumenta il volume dell'osso alveolare migliorando il sostegno dei tessuti molli.
nella parte apicale le fresature associate alle spire taglienti aumentano la capacità auto fresante.

Ogni confezione è composta da:

- Una busta alluminio contenente l'impianto con montatore in titanio utilizzabile come transfert o moncone definitivo.
- Una vite tappo
- Un foglietto illustrativo
- Etichetta paziente da applicare al passaporto implantare

PROPERTY

Internal hex connection
conical body of the implant, cylindrical of the loop
collar treated with inverse conicity
Surface treatment type S.L.A.

The implant has a double thread that favors it gradual bone condensation and excellent primary stability
The coronal part with inverse taper increases the volume of the alveolar bone by improving the support of soft tissues.
in the apex the milling associated with sharp turns increase the self-grinding capacity.

Each package consists of:

- An aluminum envelope containing the implant with titanium mounter used as a transfer or final abutment.
- A screw cap
- A leaflet
- Patient label to apply to the implant passport



Compatibile AlphaBio® / AlphaBio® compatible


Lunghezza Lenght	Ø 3,80 codice/code	Ø 4,30 codice/code
8	AC3808	AC4308
10	AC3810	AC4310
11,5	AC3811	AC4311
13	AC3813	AC4313

Accessori protesici compatibili guardare a pag. 64

Compatible prosthetic accessories see page 64

KO.INN

esagono interno
internal hex

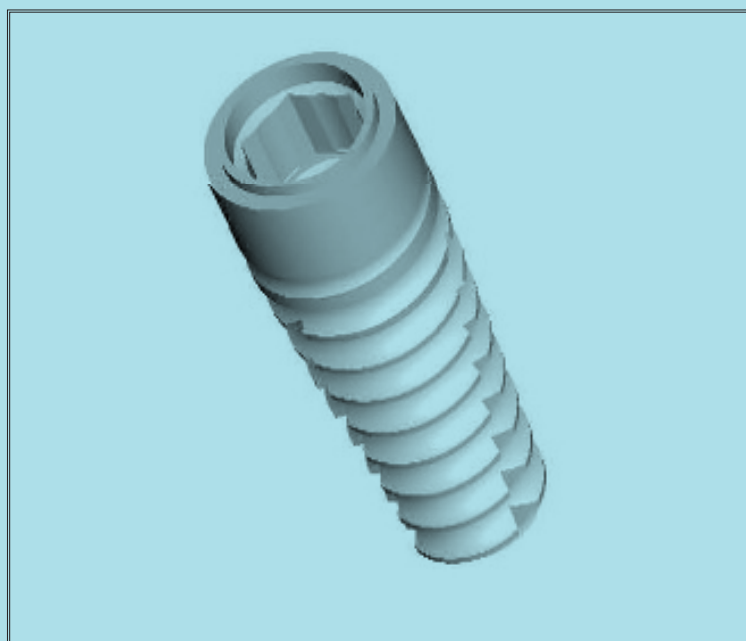

PROPRIETÀ

Connessione esagono interno
Corpo conico
Collare macchinato
Trattamento superficiale tipo S.L.A.

L'impianto ha una connessione interna più collarino esterno per stabilità alla connessione e miglior distribuzione delle forze.
Filetto con passo da 1mm del profilo conico in direzione apicale e convesso in direzione coronale.
Questo filetto permette di evitare traumi dell'osso.
Apicalmente vi sono tre incisioni che consentono di auto maschiare l'osso, hanno anche la funzione di decompressione e sfogo del coagulo.
la filettatura ha una ottima stabilità e utilizzo nella più ampia dei casi

Ogni confezione è composta da:

- Una busta alluminio contenente l'impianto con montatore in titanio utilizzabile come transfert o moncone definitivo.
- Una vite tappo
- Un foglietto illustrativo
- Etichetta paziente da applicare al passaporto implantare

PROPERTY

Internal hex connection
Conical body
Worked neck
Surface treatment type S.L.A.

The implant has an internal connection and an outer collar for connection stability and best distribution of the forces.
Thread with 1mm pitch of the conical profile in the apical direction and convex in the coronal direction.
This thread allows to avoid bone trauma.
Apically there are incisions that allow you to self-thread the bone, they also have the function of decompression and vent the clot.
the threading has excellent stability and use in the widest of cases

Each package consists of:

- An aluminum envelope containing the implant with titanium mounter used as a transfer or final abutment.
- A screw cap
- A leaflet
- Patient label to apply to the implant passport



Compatibile KOHNO® / KOHNO®compatible


Lunghezza Lenght	Ø 3,80 codice/code	Ø 4,25 codice/code
8	KO-INN3808	KO-INN4208
10	KO-INN3810	KO-INN4210
11,5	KO-INN3811	KO-INN4211
13	KO-INN3813	KO-INN4213

Accessori protesici compatibili guardare a pag. 59

Compatible prosthetic accessories see page 59

S.INN

esagono interno
internal hex

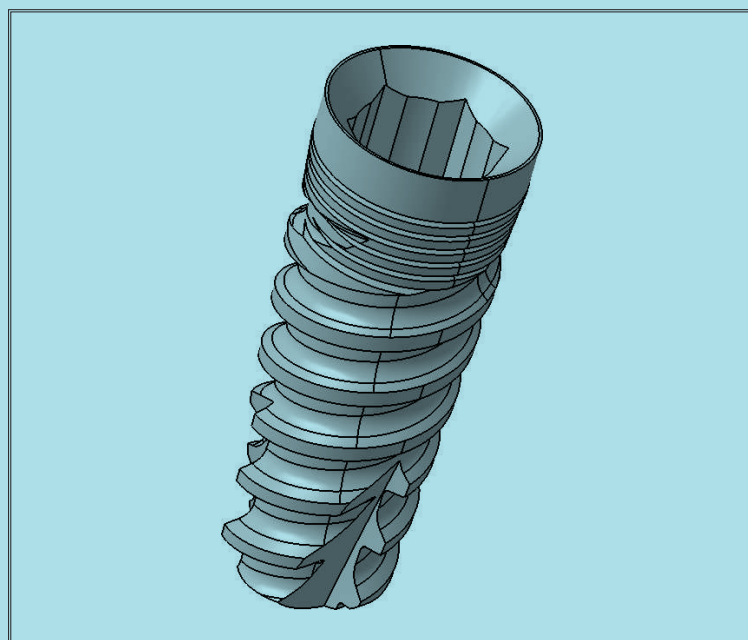

PROPRIETÀ

Connessione esagono interno
Corpo conico
Collare macchinato
Trattamento superficiale tipo S.L.A.

Caratteristica principale è la doppia filettatura, raddoppia la velocità di inserimento dell'impianto.
Inoltre la configurazione della filettatura contribuisce ad ottenere valori elevati di stabilità primaria.
La geometria conica che riproduce la radice del dente naturale ed un esclusivo disegno delle spire assicura ampie soluzioni per protocolli di carico immediato.
Apicalmente l'impianto presenta tre canali a spirale per la proprietà autofilettante, inoltre i canali raccolgono e accumulano particolato osseo durante l'inserimento coadiuvando un efficiente processo di osteointegrazione.

Ogni confezione è composta da:

- Una busta alluminio contenente l'impianto con montatore in titanio utilizzabile come transfert o moncone definitivo.
- Una vite tappo
- Un foglietto illustrativo
- Etichetta paziente da applicare al passaporto implantare

PROPERTY

Internal hex connection
Conical body
Worked neck
Surface treatment type S.L.A.

The main feature is the double thread, doubles the installation speed of the system.
In addition, the thread configuration helps to achieve high primary stability values.
The conical geometry that reproduces the root of the natural tooth and an exclusive spiral design provides ample solutions for immediate loading protocols.
Apically the implant has three spiral channels for self-tapping properties, as well as channels collecting and accumulating bone particulate during insertion assisting an efficient osteointegration process.

Each package consists of:

- An aluminum envelope containing the implant with titanium mounter used as a transfer or final abutment.
- A screw cap
- A leaflet
- Patient label to apply to the implant passport




	Compatibile MIS® Seven®/ MIS® Seven® compatible			
Lunghezza Length	Ø 3,30 codice/code	Ø 3,75 codice/code	Ø 4,20 codice/code	Ø 5,0 codice/code
8	---	S.INN3708	S.INN4208	S.INN5008
10	S.INN3310	S.INN3710	S.INN4210	S.INN5010
11,5	S.INN3311	S.INN3711	S.INN4211	S.INN5011
13	S.INN3313	S.INN3713	S.INN4213	S.INN5013
15	---	S.INN3715	---	---

Accessori protesici compatibili guardare a pag. 64

Compatible prosthetic accessories see page 64

TWO

esagono interno
internal hex

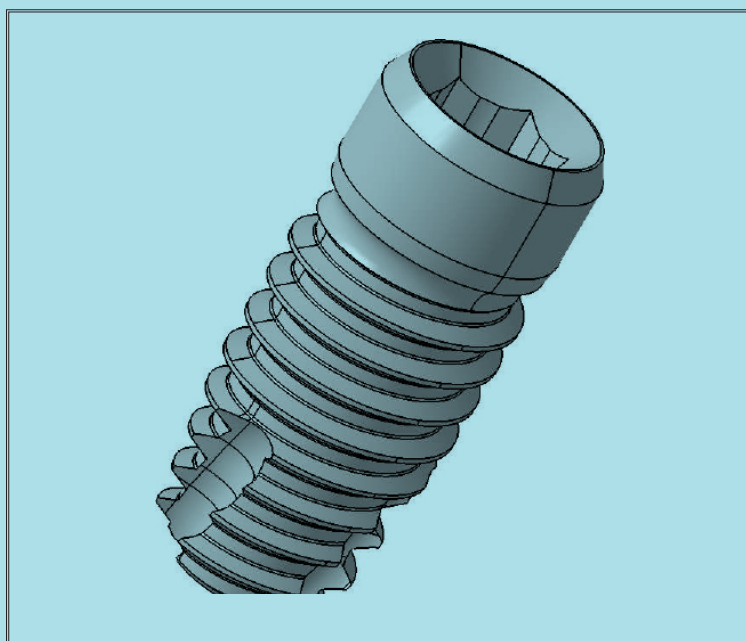

PROPRIETÀ

Connessione esagono interno
Corpo cilindrico
Collare macchinato
Trattamento superficiale tipo S.L.A.

Il disegno cilindrico con parte apicale leggermente conica, associata ad una tripla filettatura fine garantiscono all'impianto una stabilità primaria mediante osteocompressione (preparazione con sottodimensionamento) e relativo posizionamento anche nelle sedi più difficili. Inoltre il disegno autofilettante e la tripla filettatura consentono maggior velocità d'inserimento e bassa traumaticità

Ogni confezione è composta da:

- Una busta alluminio contenente l'impianto con montatore in titanio utilizzabile come transfert o moncone definitivo.
- Una vite tappo
- Un foglietto illustrativo
- Etichetta paziente da applicare al passaporto implantare

PROPERTY

Internal hex connection
Cylindrical body
Worked neck
Surface treatment type S.L.A.

The cylindrical design with a slightly conical apical part, associated with a triple fine thread guarantee to the implant a primary stability through osteocompression (preparation with underdimension) and its positioning even in the most difficult locations. Also self-tapping design and triple threading allow increased insertion speed and low traumaticity

Each package consists of:

- An aluminum envelope containing the implant with titanium mounter used as a transfer or final abutment.
- A screw cap
- A leaflet
- Patient label to apply to the implant passport






Compatibile Screw-Vent® / Screw-Vent® compatible

Lunghezza Lenght	Ø 3,75 codice/code	Ø 4,20 codice/code	Ø 4,70 codice/code
8	TWO3708	---	TWO4708
10	TWO3710	TWO4210	TWO4710
11,5	TWO3711	TWO4211	TWO4711
13	TWO3713	TWO4213	TWO4713

Accessori protesici compatibili guardare a pag. 64

Compatible prosthetic accessories see page 64



							
	Fresa lancia <i>Lance cutter</i>	Fresa Pilota <i>Pilot drill</i>	Fresa 3.00 <i>Drill 3.00</i>	Fresa 3.50 <i>Drill 3.50</i>	Fresa f 4.00 <i>Drill 4.00</i>	Fresa 4.50 <i>Drill 4.50</i>	Fresa 5.00 <i>Drill 5.00</i>
Diametro <i>Diameter</i>	Ø reale <i>Ø real</i>	Ø 2.20	Ø 2.60	Ø 3.10	Ø 3.60	Ø 4.10	Ø 4.60


COMPATIBILITÀ SEQUENZA CHIRURGICA
COMPATIBILITY SURGICAL SEQUENCE

IMPIANTI DENTAL PLANET <i>IMPLANTS DENTAL PLANET</i>	COMPATIBILITÀ <i>COMPATIBILITY</i>
ONE	NOBEL BRK® esagono esterno / <i>external hex</i>
TWO	SCREW-VENT® esagono interno / <i>internal hex</i>
KO-INN	SWEDEN KOHNO® esagono interno / <i>internal hex</i>
S-INN	MIS® SEVEN® esagono interno / <i>internal hex</i>
ACTIVE	ALPHA BIO® esagono interno / <i>internal hex</i>

ACCESSORI ACCESSORIES	CODICE CODE
STOP FRESE / DRILLS STOP 	L. 8 - L. 10 - L.11 - L. 13 - L. 15
CRICCHETTO/ RATCHET 	CRF-
PROLUNGA PER CRICCHETTO/ EXTENSION FOR RATCHET 	DP-93
INSERITORE DA MANIPOLO / INSERT FOR CONTRA-ANGLE 	DP-93/A
ALLUNGATORE CHIRURGICO / SURGICAL EXTENDER 	AIP-1
CHIAVE DA CONTRANGOLO / CONTRA-ANGLE KEY 	1,20 1,27 TORX

ACCESSORI COMPATIBILI

COMPATIBLE ACCESSORIES

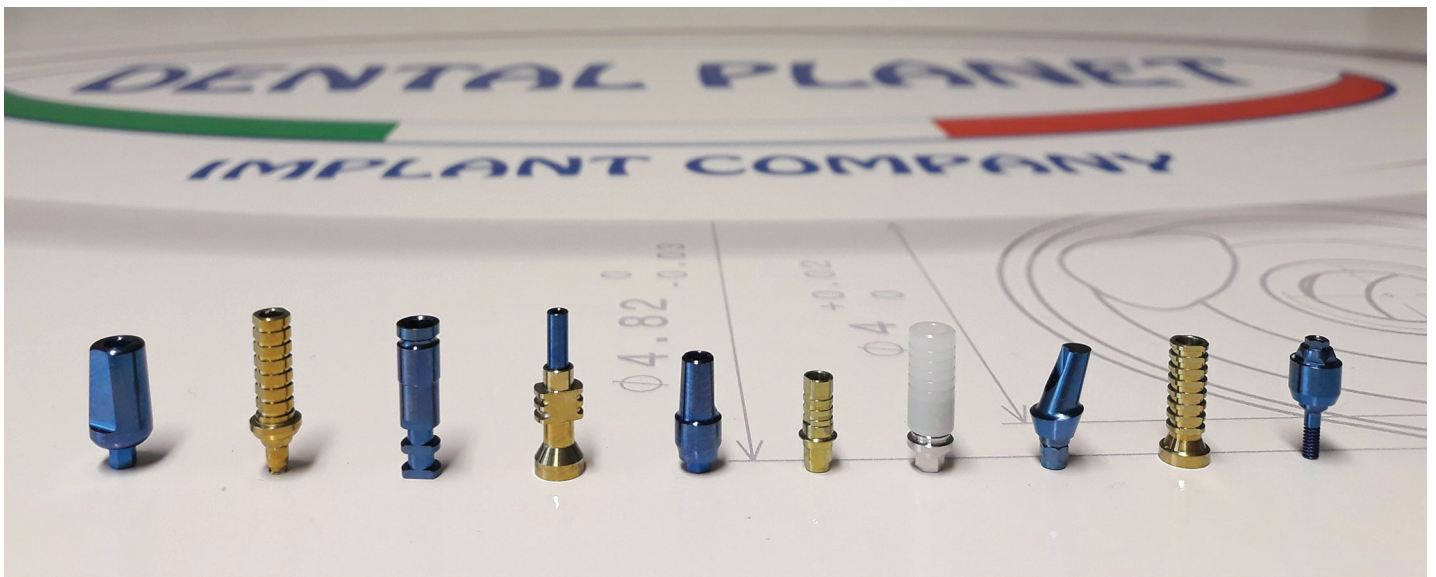

Accessori compatibili con:
Accessories compatible with:

ASTRA TECH®



Altre compatibilità:
other compatibility:

GEASS®WAY® MILANO


Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3,5/4,0 Codice /Code	ø 4,5/5,0 Codice /Code		
	ANALOGO / ANALOG	AT35A	AT45A		
	TRANSFER / TRANSFER	AT35TL	AT45TL		
	VITE DI GUARIGIONE ø 4,5 HEALING ABUTMENT ø 4,5				
	H.2	AT35VG2	---		
	H.4	AT35VG4	---		
	H.6	AT35VG6	---		
	VITE DI GUARIGIONE ø 5,5 HEALING ABUTMENT ø 5,5				
	H.2	---	AT45VG2		
	H.4	AT35VG54	AT45VG4		
	H.6	AT35VG56	AT45VG6		
	MONCONI DRITTI STRAIGHT ABUTMENT				
	H.1	AT35MT-1	AT45MT-1		
	H.3	AT35MT-3	AT45MT-3		
	FRESABILE	AT35MT7-F	AT45MT7-F		
	MONCONI ANGOLATI ANGLED ABUTMENT				
	15° H.2	AT35MT15-2	AT45MT15-2		
	15° H.3	AT35MT15-3	AT45MT15-3		
	25° H.2	AT35MT25	AT45MT25		
	VITE / SCREW	DP-13/A4	DP-13/A5		

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3,5/4,0 Codice /Code	ø 4,5/5,0 Codice /Code		
 MONCONE PROVVISORIO TEMPORARY ABUTMENT NON ROTANTE / NO ROTATING		AT35PROV	AT45PROV		
	 CALCINABILE / CASTABLE ROTANTE / ROTATING NON ROTANTE / NO ROTATING	AT35CA-R	---		
	 CALCINABILE CR/CO CR/CO CASTABLE NON ROTANTE / NO ROTATING	AT35CR	AT45CR		

Accessori compatibili con:
Accessories compatible with:

BIOMET 3i[®]

esagono esterno

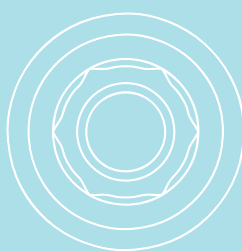


Altre compatibilità:
other compatibility:

BTI[®]
BIOLOK[®]
BIOTEC[®]
BT KLASSIC EXT[®] RP
GEASS[®] WAY[®] VENEZIA RP
INTRALOCK[®]
MY IMPLANT[®]
P1H[®]
SOUTHERN[®]
SWEDEN & MARTINA OUTLINK[®] RP

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3,25 Codice /Code	ø 3,75/4,0 Codice /Code	ø 5,0 Codice /Code	
	ANALOGO / ANALOGUE	C325A	DP-24	DP-29	
	TRANSFER / TRANSFER	---	DP-36	---	
	VITE DI GUARIGIONE CILINDRICA CILINDRICAL HEALING ABUTMENT				
	H.3	---	DP-75	DP-74	
	H.4	---	DP-75/A	DP-74/A	
	H.5	---	DP-75/B	DP-74/B	
	VITE DI GUARIGIONE ANATOMICA ANATOMICAL HEALING ABUTMENT				
	H.3	---	DP-78	DP-84	
	H.4	---	DP-78/A	DP-84/A	
	H.5	---	DP-78/B	---	
	MONCONI DRITTI STRAIGHT ABUTMENT				
	H.1	---	DP-05/A	DP-100	
	H.2	---	DP-06/A	---	
	H.3	---	DP-07/A	DP-102	
	H.4	---	DP-08/A	---	
	FRESABILE	C325MT-F	---	---	
	MONCONI ANGOLATI ANGLED ABUTMENT				
	15° H.2	---	DP-02/A	DP-02/B	
	25° H.2	---	DP-03/B	---	
	VITE / SCREW	DP-13	DP-13	DP-13	

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3,25 Codice /Code	ø 3,75/4,0 Codice /Code	ø 5,0 Codice /Code	
	MONCONE PROVVISORIO TEMPORARY ABUTMENT				
	ROTANTE / ROTATING	---	DP-106/A	---	
	NON ROTANTE / NO ROTATING	---	DP-106	---	
	MONCONE PER INCOLLAGGIO ABUTMENT FOR BONDING				
	ROTANTE / ROTATING	---	BRK41CI-R	---	
	NON ROTANTE / NO ROTATING	---	BRK41CI	---	
	CALCINABILE / CASTABLE				
	ROTANTE / ROTATING	---	DP-12	DP-45/A	
	NON ROTANTE / NO ROTATING	C325I	DP-12/A	DP-45	
	CALCINABILE CR/CO CR/CO CASTABLE				
	ROTANTE / ROTATING	---	BRK41CR-R	---	
	NON ROTANTE / NO ROTATING	---	BRK41CR	---	
	OVERLOC				
	H.1	---	BRK-410/1	---	
	H.2	---	BRK-410/2	---	
	H.3	---	BRK-410/3	---	
	H.4	---	BRK-410/4	---	

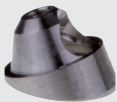Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3.25 Codice / <i>Code</i>	ø 3,75/4,0 Codice / <i>Code</i>	ø 5,0 Codice / <i>Code</i>	
	ANALOGO / ANALOGUE	---	LA010	---	
	TRANSFER / TRANSFER	---	LTE010	---	
	VITE DI GUARIGIONE HEALING ABUTMENT	---	LMEVG	---	
	MONCONI DRITTI STRAIGHT ABUTMENT				
	H.1	---	LMET10	---	
	H.2	---	LMET20	---	
	H.3	---	LMET30	---	
	H.4	---	LMET40	---	
	MONCONI ANGOLATI ANGLED ABUTMENT				
	17° H.2	---	LMET17/A	---	
	30° H.3	---	LMET30/A	---	
	VITE / SCREW	---	DP-77/T	---	

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3.25 Codice /Code	ø 3,75/4,0 Codice /Code	ø 5,0 Codice /Code	
	MONCONE PROVVISORIO TEMPORARY ABUTMENT	---	LEP010	---	
	PROVVISORIO PER SALDATURA TEMPORARY FOR WELDING	---	LEP010-L	---	
	MONCONE PER INCOLLAGGIO ABUTMENTE FOR BOLDING	---	BRK-S MUA	---	
	CALCINABILE CASTABLE	---	LMCE1	---	
	CALCINABILE CR/CO CR/CO CASTABLE	---	LMCE1-CR	---	

Accessori compatibili con:
Accessories compatible with:

BIOMET 3i[®] Certain[®]



Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3,25 Codice / <i>Code</i>	ø 4,1 Codice / <i>Code</i>	ø 5,0 Codice / <i>Code</i>	
	ANALOGO / ANALOGUE	C3AN3	C3AN4	C3AN5	
	TRANSFER / TRANSFER	C3CO34	C3CO41	C3CO50	
	VITE DI GUARIGIONE HEALING ABUTMENT				
	H.2	C3VG352	C3VG412	C3VG512	
	H.4	C3VG354	C3VG414	C3VG514	
	MONCONI DRITTI STRAIGHT ABUTMENT				
	H.2	C3MT3-2	C3MT4-2	C3MT5-2	
	H.4	C3MT3-4	C3MT4-4	C3MT5-4	
	MONCONI ANGOLATI ANGLED ABUTMENT				
	15° H.2	C3MT3152	C3MT4152	C3MT5152	
	15° H.4	C3MT3154	C3MT4154	---	
	25° H.2	---	C3MT4252	---	
	MONCONE PROVVISORIO TEMPORARY ABUTMENT				
	ROTANTE / ROTATING	C3PROV34-R	C3PROV41-R	C3PROV50-R	
	NON ROTANTE / NO ROTATING	C3PROV34	C3PROV41	C3PROV50	
	VITE / SCREW	DP-13C	DP-13C	DP-13C	

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3,25 Codice /Code	ø 4,1 Codice /Code	ø 5,0 Codice /Code	
	MONCONE PER INCOLLAGGIO ABUTMENT FOR BONDING				
	ROTANTE / ROTATING NON ROTANTE / NO ROTATING	C3CI34-R C3CI34	C3CIS41-R C3CIS41	--- ---	
	CALCINABILE / CASTABLE				
	ROTANTE / ROTATING NON ROTANTE / NO ROTATING	C3CA3-R C3CA3	C3CA4-R C3CA4	C3CA5-R C3CA5	
	CALCINABILE CR/CO CR/CO CASTABLE				
	ROTANTE / ROTATING NON ROTANTE / NO ROTATING	C3CR34-R C3CR34	C3CR41-R C3CR41	C3CR50-R C3CR50	
	OVERLOC				
	H.1	C3-340/1	C3-410/1	---	
	H.2	C3-340/2	C3-410/2	---	
	H.3	C3-340/3	C3-410/3	---	
	H.4	---	C3-410/4	---	

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3.25 Codice / <i>Code</i>	ø 4,1 Codice / <i>Code</i>	ø 5,0 Codice / <i>Code</i>	
	ANALOGO / ANALOGUE	LA010	LA010	---	
	TRANSFER / TRANSFER	LTE010	LTE010	---	
	VITE DI GUARIGIONE HEALING ABUTMENT	LMEVG	LMEVG	---	
	MONCONI DRITTI STRAIGHT ABUTMENT				
	H.1	C3MU34-1	---	---	
	H.2	C3MU34-2	C3MU41-2	---	
	H.3	C3MU34-3	---	---	
	H.4	---	C3MU41-4	---	
	MONCONI ANGOLATI ANGLED ABUTMENT				
	17° H.2	C3MU3417	---	---	
	30° H.3	C3MU3430	---	---	
	17° H.3	---	C3MU4117	---	
	30° H.4	---	C3MU4130	---	
	VITE / SCREW	DP-77/T	DP-77/T	---	

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3.25 Codice /Code	ø 4,1 Codice /Code	ø 5,0 Codice /Code	
	MONCONE PROVVISORIO TEMPORARY ABUTMENT	LEP010	LEP010	---	
	PROVVISORIO PER SALDATURA TEMPORARY FOR WELDING	LEP010-L	LEP010-L	---	
	MONCONE PER INCOLLAGGIO ABUTMENTE FOR BOLDING	BRK-S MUA	BRK-S MUA	---	
	CALCINABILE CASTABLE	LMCE1	LMCE1	---	
	CALCINABILE CR/CO CR/CO CASTABLE	LMCE1-CR	LMCE1-CR	---	

Accessori compatibili con:
Accessories compatible with:

FRIALIT® XIVE®



Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3.40 Codice /Code	ø 3.80 Codice /Code	ø 4.50 Codice /Code	
	ANALOGO / ANALOGUE	DP-92	DP-92/A	DP-92/B	
	TRANSFER / TRANSFER	CO34	CO38	CO45	
	VITE DI GUARIGIONE HEALING ABUTMENT				
	H.2	VG34-2	VG38-2	---	
	H.3	VG34-3	VG38-3	VG45-3	
	H.5	VG34-5	VG38-5	VG45-5	
	MONCONI DRITTI STRAIGHT ABUTMENT				
	H.2	MT34	MT38	MT45	
	MONCONI ANGOLATI ANGLED ABUTMENT				
	15° H.2	MT3415	MT3815	MT4515	
	VITE / SCREW	DP-13FR	DP-13FR	DP-13FR	

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3.40 Codice /Code	ø 3.80 Codice /Code	ø 4.50 Codice /Code	
 MONCONE PER INCOLLAGGIO ABUTMENT FOR BONDING ROTANTE / ROTATING NON ROTANTE / NO ROTATING		MT34CI-R MT34CI	MT38CI-R MT38CI	MT45CI-R MT45CI	
	 CALCINABILE / CASTABLE NON ROTANTE / NO ROTATING	DP-91	DP-91/A	DP-91/B	
	 CALCINABILE CR/CO CR/CO CASTABLE NON ROTANTE / NO ROTATING	MT34CR	MT38CR	MT45CR	

Accessori compatibili con:
Accessories compatible with:

LEONE[®]

Accessori / *Accessories*

ø 3,30

Codice /Code

ø 4,1

Codice /Code



MONCONI DRITTI
STRAIGHT ABUTMENT

LEO33MT

LEO41MT



MONCONI ANGOLATI
ANGLED ABUTMENT

15°

LEO33MTA

LEO41MTA

25°

LEO33MT25

LEO41MT25


Accessori compatibili con:
Accessories compatible with:

LIFECORE®
PRIMA CONNEX®

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3,50 Codice /Code	ø 4,10 Codice /Code	ø 5,0 Codice /Code	
 ANALOGO / ANALOGUE  MONCONE FRESABILE MILLABLE ABUTMENT  CALCINABILE / CASTABLE ROTANTE / ROTATING NON ROTANTE / NO ROTATING  VITE / SCREW					
		LF35AN	LF40AN	LF50AN	
		LF35MT	LF40MT	---	
		LF35CAR LF35CA	LF40CAR LF40CA	--- LF50CA	
		DP-13LF	DP-13LF	DP-13LF	

Accessori compatibili con:
Accessories compatible with:

NEOSS[®]

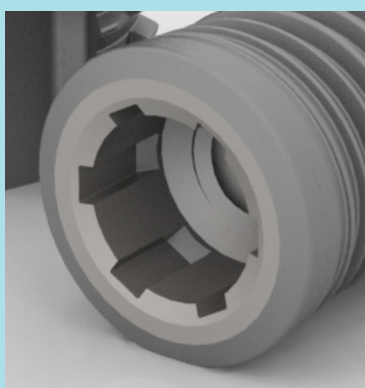

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 4,10 Codice / <i>Code</i>			
	ANALOGO / ANALOGUE	DP-79/B			
	MONCONE FRESABILE MILLABLE ABUTMENT	NEO41MT-F			
	MONCONE PROVVISORIO TEMPORARY ABUTMENT	NEO41PT			
	CALCINABILE / CASTABLE NON ROTANTE / NO ROTATING	DP-79			
	VITE / SCREW	DP-13NE			

Accessori compatibili con:
Accessories compatible with:

NOBEL ACTIVE®



Altre compatibilità:
other compatibility:

NOBEL REPLACE® CC

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3,50 Codice /Code	ø 4,3/5,0 Codice /Code		
	ANALOGO / ANALOG	NA35AN	NA43AN		
	TRANSFER / TRANSFER	NA35CO	NA43CO		
	VITE DI GUARIGIONE HEALING ABUTMENT				
	H.3	NA35VG-3	NA43VG-3		
	H.4	NA35VG-4	NA43VG-4		
	H.5	NA35VG-5	NA43VG-5		
	MONCONI DRITTI STRAIGHT ABUTMENT				
	H.1	NAMT35-1	NAMT43-1		
	H.3	NAMT35-3	NAMT43-3		
	MONCONI ANGOLATI ANGLED ABUTMENT				
	17° H.1	NAMT3517-1	NAMT4317-1		
	17° H.3	NAMT3517-3	NAMT4317-3		
	MONCONE PROVVISORIO TEMPORARY ABUTMENT				
	ROTANTE / ROTATING	NA35PROV-R	NA43PROV-R		
	NON ROTANTE / NO ROTATING	NA35PROV	NA43PROV		
	VITE / SCREW	DP-13NT	DP-13NA4		

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3,50 Codice / <i>Code</i>	ø 4,3/5,0 Codice / <i>Code</i>		
	MONCONE PER INCOLLAGGIO ABUTMENT FOR BONDING				
	ROTANTE / ROTATING NON ROTANTE / NO ROTATING	NA35CI-R NA35CI	NA43CI-R NA43CI		
	CALCINABILE / CASTABLE				
	ROTANTE / ROTATING NON ROTANTE / NO ROTATING	NA35CA-R NA35CA	NA43CA-R NA43CA		
	CALCINABILE CR/CO CR/CO CASTABLE				
	ROTANTE / ROTATING NON ROTANTE / NO ROTATING	NA35CR-R NA35CR	NA43CR-R NA43CR		
	OVERLOC				
	H.1	---	NA-430/1		
	H.2	---	NA-430/2		
	H.3	---	NA-430/4		
	H.4	---	NA-430/4		

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3,50 Codice /Code	ø 4,3/5,0 Codice /Code		
	ANALOGO / ANALOGUE	LA010	LA010		
	TRANSFER / TRANSFER	LTE010	LTE010		
	VITE DI GUARIGIONE HEALING ABUTMENT	LMEVG	LMEVG		
	MONCONI DRITTI STRAIGHT ABUTMENT				
	H.1	NA35MU-1	NA43MU-1		
	H.2	NA35MU-2	NA43MU-2		
	H.3	NA35MU-3	NA43MU-3		
	MONCONI ANGOLATI ANGLED ABUTMENT				
	17° H.2	NA35MU17	NA43MU17		
	30° H.3	NA35MU30	NA43MU30		
	VITE / SCREW	DP-77/T	DP-77/T		

Accessori / Accessories

ø 3,50
Codice /Code

ø 4,3/5,0
Codice /Code



MONCONE PROVVISORIO
TEMPORARY ABUTMENT

LEP010

LEP010



PROVVISORIO PER SALDATURA
TEMPORARY FOR WELDING

LEP010-L

LEP010-L



MONCONE PER INCOLLAGGIO
ABUTMENT FOR BOLDING

BRK-S MUA

BRK-S MUA



CALCINABILE
CASTABLE

LMCE1

LMCE1




CALCINABILE CR/CO
CR/CO CASTABLE

LMCE1-CR

LMCE1-CR

Accessori compatibili con:
Accessories compatible with:

NOBEL BRANEMARK®

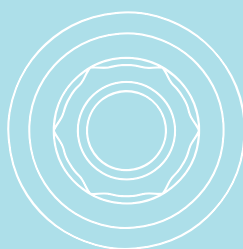

Altre compatibilità:
other compatibility:

BTI®
BIOLOK®
BIOTEC®
BT KLASSIC EXT® RP
GEASS®WAY® VENEZIA RP
INTRALOCK®
MY IMPLANT®
P1H®
SOUTHERN®
SWEDEN & MARTINA OUTLINK® RP

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3,50 Codice /Code	ø 3,75/4,0 Codice /Code	ø 5,0 Codice /Code	
	ANALOGO / ANALOG	DP-31/A	DP-24	DP-31	
	TRANSFER / TRANSFER	DP-001MI NP	DP-36	DP-51WP	
	VITE DI GUARIGIONE CILINDRICA CILINDRICAL HEALING ABUTMENT				
	H.3	---	DP-75	---	
	H.4	---	DP-75/A	---	
	H.5	---	DP-75/B	---	
	VITE DI GUARIGIONE ANATOMICA ANATOMICAL HEALING ABUTMENT				
	H.3	DP-51	DP-78	DP-48	
	H.4	DP-51/A	DP-78/A	DP-48/A	
	H.5	DP-51/B	DP-78/B	DP-48/B	
	MONCONI DRITTI STRAIGHT ABUTMENT				
	H.1	DP-50/B	DP-05T/A	---	
	H.2	---	DP-06T/A	DP-50/D	
	H.3	DP-50	DP-07T/A	---	
	H.4	---	DP-08T/A	DP-50/A	
	MONCONI ANGOLATI ANGLED ABUTMENT				
	15° H.2	DP-51/15	DP-02T/A	DP-50/15WP	
	25° H.2	---	DP-03T/B	---	
	VITE / SCREW	DP-13NT	DP-13T	DP-13WP	

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3,50 Codice /Code	ø 3,75/4,0 Codice /Code	ø 5,0 Codice /Code	
	MONCONE PROVVISORIO TEMPORARY ABUTMENT				
	ROTANTE / ROTATING NON ROTANTE / NO ROTATING	DP-119/R DP-119	DP-106T/A DP-106T	DP-119WP-R DP-119WP	
	MONCONE PER INCOLLAGGIO ABUTMENT FOR BONDING				
	ROTANTE / ROTATING NON ROTANTE / NO ROTATING	BRK35CI-R BRK35CI	BRK41CI-R BRK41CI	--- ---	
	CALCINABILE / CASTABLE				
	ROTANTE / ROTATING NON ROTANTE / NO ROTATING	DP-46/C DP-46/B	DP-12T DP-12T/A	DP-46/A DP-46	
	CALCINABILE CR/CO CR/CO CASTABLE				
	ROTANTE / ROTATING NON ROTANTE / NO ROTATING	BRK35CR-R BRK35CR	BRK41CR-R BRK41CR	--- ---	
	OVERLOC				
	H.1	---	BRK-410/1	---	
	H.2	---	BRK-410/2	---	
	H.3	---	BRK-410/3	---	
	H.4	---	BRK-410/4	---	

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3,50 Codice / <i>Code</i>	ø 3,75/4,0 Codice / <i>Code</i>	ø 5,0 Codice / <i>Code</i>	
	ANALOGO / ANALOGUE	LA010	LA010	---	
	TRANSFER / TRANSFER	LTE010	LTE010	---	
	VITE DI GUARIGIONE HEALING ABUTMENT	LMEVG	LMEVG	---	
	MONCONI DRITTI STRAIGHT ABUTMENT				
	H.1	---	LMET10	---	
	H.2	---	LMET20	---	
	H.3	---	LMET30	---	
	H.4	---	LMET40	---	
	MONCONI ANGOLATI ANGLED ABUTMENT				
	17° H.2	---	LMET17/A	---	
	30° H.3	---	LMET30/A	---	
	VITE / SCREW	DP-77/T	DP-77/T	---	

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3.50 Codice / <i>Code</i>	ø 3,75/4,0 Codice / <i>Code</i>	ø 5,0 Codice / <i>Code</i>	
	MONCONE PROVVISORIO TEMPORARY ABUTMENT	LEP010	LEP010	---	
	PROVVISORIO PER SALDATURA TEMPORARY FOR WELDING	LEP010-L	LEP010-L	---	
	MONCONE PER INCOLLAGGIO ABUTMENT FOR BOLDING	BRK-S MUA	BRK-S MUA	---	
	CALCINABILE CASTABLE	LMCE1	LMCE1	---	
	CALCINABILE CR/CO CR/CO CASTABLE	LMCE1-CR	LMCE1-CR	---	

Accessori compatibili con:
Accessories compatible with:

NOBEL REPLACE[®]



Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3,50 Codice /Code	ø 4,3 Codice /Code	ø 5,0 Codice /Code	
	ANALOGO / ANALOGUE	DP-89/B	DP-89	DP-89/A	
	TRANSFER / TRANSFER	RPL35CO	RPL43CO	RPL50CO	
	VITE DI GUARIGIONE HEALING ABUTMENT				
	H.3	RPL35VG3	RPL43VG3	RPL50VG3	
	H.5	RPL35VG5	RPL43VG5	RPL50VG5	
	MONCONI DRITTI STRAIGHT ABUTMENT				
	H.1	RPL35T-1	RPL43T-1	RPL50T-1	
	H.3	RPL35T-3	RPL43T-3	RPL50T-3	
	MONCONI ANGOLATI ANGLED ABUTMENT				
	15° H.1	RPL35A15-1	RPL43A15-1	RPL50A15-1	
	15° H.3	RPL35A15-3	RPL43A15.3	RPL50A15-3	
	MONCONE PROVVISORIO TEMPORARY ABUTMENT				
	ROTANTE / ROTATING	RPL35PROV-R	RPL43PROV-R	RPL50PROV-R	
	NON ROTANTE / NO ROTATING	RPL35PROV	RPL43PROV	RPL50PROV	
	VITE / SCREW	DP-13NRT	DP-13RT	DP-13RT	

Accessori / *Accessories*

ø 3,50

Codice /Code

ø 4,3

Codice /Code

ø 5,0

Codice /Code



MONCONE PER INCOLLAGGIO
ABUTMENT FOR BONDING

ROTANTE / ROTATING

NON ROTANTE / NO ROTATING

RPL35CIS

RPL43CIS



CALCINABILE / CASTABLE

ROTANTE / ROTATING

NON ROTANTE / NO ROTATING

DP-80/R

DP-80

DP-80/AR

DP-80/A

DP-80/B



CALCINABILE CR/CO
CR/CO CASTABLE

ROTANTE / ROTATING

NON ROTANTE / NO ROTATING

RPL35CR-R

RPL35CR

RPL43CR-R

RPL43CR

RPL50CR

OVERLOC

H.1

H.2

H.3

H.4

RPL-430/1

RPL-430/2

RPL-430/3

RPL-430/4



Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3,50 Codice /Code	ø 4,3 Codice /Code	ø 5,0 Codice /Code	
	ANALOGO / ANALOGUE	LA010	LA010	---	
	TRANSFER / TRANSFER	LTE010	LTE010	---	
	VITE DI GUARIGIONE HEALING ABUTMENT	LMEVG	LMEVG	---	
	MONCONI DRITTI STRAIGHT ABUTMENT				
	H.1	RPL35AE1	RPL43AE1	RPL50AE1	
	H.2	RPL35AE2	RPL43AE2	---	
	H.4	RPL35AE4	RPL43AE4	RPL50AE4	
	MONCONI ANGOLATI ANGLED ABUTMENT				
	17° H.2	RPL35MU17-2	RPL43MU17-2	---	
	17° H.3	RPL35MU17-3	RPL43MU17-3	---	
	30° H.3	---	RPL43MU30-3	---	
	30° H.4	---	RPL43MU30-4	---	
	VITE / SCREW	DP-77/T	DP-77/T	---	

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3,50 Codice /Code	ø 4,3 Codice /Code	ø 5,0 Codice /Code	
	MONCONE PROVVISORIO TEMPORARY ABUTMENT	LEP010	LEP010	---	
	PROVVISORIO PER SALDATURA TEMPORARY FOR WELDING	LEP010-L	LEP010-L	---	
	MONCONE PER INCOLLAGGIO ABUTMENTE FOR BOLDING	BRK-S MUA	BRK-S MUA	---	
	CALCINABILE CASTABLE	LMCE1	LMCE1	---	
	CALCINABILE CR/CO CR/CO CASTABLE	LMCE1-CR	LMCE1-CR	---	

Accessori compatibili con:
Accessories compatible with:

PREMIUM KOHNO®



Accessori / *Accessories*

	ø 3.30 Codice /Code	ø 3.80 Codice /Code	ø 4.25 Codice /Code	ø 5.0 Codice /Code
	KO33AN	KO38AN	KO42AN	KO50AN
	KO33CO	KO38CO	KO42CO	KO50CO
				
H.2	KO33VG2	KO38VG2	KO42VG2	KO50VG2
H.4	KO33VG4	KO38VG4	KO42VG4	KO50VG4
				
H.1	KO33MT-1	KO38MT-1	KO42MT-1	KO50MT-1
H.2	KO33MT-2	KO38MT-2	KO42MT-2	KO50MT-2
H.4	---	KO38MT-4	KO42MT-4	---
				
15° H.1	KO33AG-15	---	---	KO50AG-15
15° H.2	---	KO38AG-15	KO42AG-15	---
25° H.2	---	KO38AG-25	KO42AG-25	---
	DP-13K3	DP-13K3	DP-13K4	DP-13K4

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3.30 Codice /Code	ø 3.80 Codice /Code	ø 4.25 Codice /Code	ø 5,0 Codice /Code
	MONCONE PROVVISORIO TEMPORARY ABUTMENT				
	ROTANTE / ROTATING NON ROTANTE / NO ROTATING	KO33PROV-R KO33PROV	KO38PROV-R KO38PROV	KO42PROV-R KO42PROV	KO50PROV-R KO50PROV
	MONCONE PER INCOLLAGGIO ABUTMENT FOR BONDING				
	ROTANTE / ROTATING NON ROTANTE / NO ROTATING	--- ---	KO38CS-R KO38CS	KO42CS-R KO42CS	--- ---
	CALCINABILE / CASTABLE				
	ROTANTE / ROTATING NON ROTANTE / NO ROTATING	KO33CAR KO33CA	KO38CAR KO38CA	KO42CAR KO42CA	KO50CAR KO50CA
	CALCINABILE CR/CO CR/CO CASTABLE				
	ROTANTE / ROTATING NON ROTANTE / NO ROTATING	KO33CR-R KO33CR	KO38CR-R KO38CR	KO42CR-R KO42CR	--- ---

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3.30 Codice / <i>Code</i>	ø 3.80 Codice / <i>Code</i>	ø 4.25 Codice / <i>Code</i>	ø 5.0 Codice / <i>Code</i>
  	ANALOGO / ANALOGUE	---	KO-01	KO-01	---
	TRANSFER / TRANSFER	---	KO-06	KO-06	---
	VITE DI GUARIGIONE HEALING ABUTMENT	---	KO-04	KO-04	---
	MONCONI DRITTI STRAIGHT ABUTMENT				
	H.1	---	KO38MU-1	KO42MU-1	---
	H.2	---	KO38MU-2	KO42MU-2	---
	H.3	---	KO38MU-3	KO42MU-3	---
	H.4	---	KO38MU-4	KO42MU-4	---
	MONCONI ANGOLATI ANGLED ABUTMENT				
	17° H.3	---	KO38MU17	KO42MU17	---
	30° H.3	---	KO38MU30	KO42MU30	---
	VITE / SCREW	---	DP-13/KV	DP-13/KV	---

Accessori / *Accessories*

ø 3.30

Codice /Code

ø 3.80

Codice /Code

ø 4.25

Codice /Code

ø 5.0

Codice /Code



MONCONE PROVVISORIO
TEMPORARY ABUTMENT

KO-03

KO-03



PROVVISORIO PER SALDATURA
TEMPORARY FOR WELDING

KO-05

KO-05




CALCINABILE
CASTABLE

KO-02

KO-02

Accessori compatibili con:
Accessories compatible with:

SCREW VENT[®]

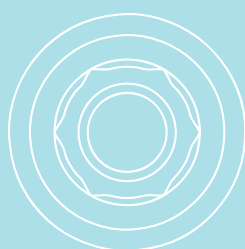

Altre compatibilità:
other compatibility:

ALPHA BIO[®]
BIO - HORIZONS[®]
BT KLASSIC[®] INT
IMPLANT DIRECT[®]
ISOMED[®]
MIS[®] SEVEN[®]

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3.30 Codice /Code	ø 3.50 Codice /Code	ø 4.50 Codice /Code	
	ANALOGO / ANALOGUE	MS33AN	DP-01	DP-01/A	
	TRANSFER / TRANSFER	MS33TRA	DP-108/C	DP-108/D	
	VITE DI GUARIGIONE HEALING ABUTMENT				
	H.2	---	DP-43	DP-44	
	H.3	MS33VG-3	DP-43/A	DP-44/A	
	H.4	MS33VG-4	DP-43/B	DP-44/B	
	H.5	MS33VG-5	DP-43/C	DP-44/C	
	MONCONI DRITTI STRAIGHT ABUTMENT				
	H.1	MS-33/1	DP-05	DP-100/A	
	H.2	---	DP-06	DP-101/A	
	H.3	MS-33/3	DP-07	DP-102/A	
	H.4	---	DP-08	---	
	MONCONI ANGOLATI ANGLED ABUTMENT				
	15° H.1	---	DP-02/E	---	
	15° H.2	MS-3315	DP-02	DP-02/C	
	15° H.3	---	DP-02/D	---	
	25° H.2	---	DP-03	---	
	VITE / SCREW	DP-13MS	DP-13I	DP-13I	


Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3.30 Codice /Code	ø 3.50 Codice /Code	ø 4.50 Codice /Code	
	MONCONE PROVVISORIO TEMPORARY ABUTMENT				
	ROTANTE / ROTATING NON ROTANTE / NO ROTATING	MS33PROV-R MS33PROV	DP-108/A DP-108	DP-110/A DP-110	
	MONCONE PER INCOLLAGGIO ABUTMENT FOR BONDING				
	ROTANTE / ROTATING NON ROTANTE / NO ROTATING	--- ---	SV35CI-R SV35CI	SV45CS-R SV45CS	
	CALCINABILE / CASTABLE				
	ROTANTE / ROTATING NON ROTANTE / NO ROTATING	--- MS33CA	DP-09/A DP-09	DP-09/C DP-09/B	
	CALCINABILE CR/CO CR/CO CASTABLE				
	ROTANTE / ROTATING NON ROTANTE / NO ROTATING	MS33CR-R MS33CR	TWO35CR-R TWO35CR	TWO45CR-R TWO45CR	
	OVERLOC				
	H.1	---	SV-350/1	---	
	H.2	---	SV-350/2	---	
	H.3	---	SV-350/3	---	
	H.4	---	SV-350/4	---	
	H.5	---	SV-350/5	---	

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3.30 Codice /Code	ø 3.50 Codice /Code	ø 4.50 Codice /Code	
	ANALOGO / ANALOGUE	LA010	LA010	---	
	TRANSFER / TRANSFER	LTE010	LTE010	---	
	VITE DI GUARIGIONE HEALING ABUTMENT	LMEVG	LMEVG	---	
	MONCONI DRITTI STRAIGHT ABUTMENT				
	H.1	MS33MUA-1	SVMU-1	---	
	H.2	---	SVMU-2	---	
	H.3	MS33MUA-3	SVMU-3	---	
	H.4	---	SVMU-4	---	
	MONCONI ANGOLATI ANGLED ABUTMENT				
	17° H.3	MS33MUA17	SVMU-17-3	---	
	30° H.3	MS33MUA30	SVMU-30-3	---	
	VITE / SCREW	DP-77/T	DP-77/T	---	

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3.30 Codice /Code	ø 3.50 Codice /Code	ø 4.50 Codice /Code	
	MONCONE PROVVISORIO TEMPORARY ABUTMENT	LEP010	LEP010	---	
	PROVVISORIO PER SALDATURA TEMPORARY FOR WELDING	LEP010-L	LEP010-L	---	
	MONCONE PER INCOLLAGGIO ABUTMENT FOR BOLDING	BRK-S MUA	BRK-S MUA	---	
	CALCINABILE CASTABLE	LMCE1	LMCE1	---	
	CALCINABILE CR/CO CR/CO CASTABLE	LMCE1-CR	LMCE1-CR	---	

Accessori compatibili con:
Accessories compatible with:

STRAUMANN[®]
BONE LEVEL[®]

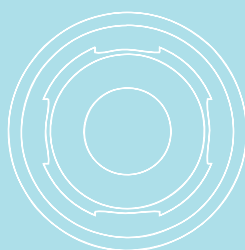

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3.30 Codice /Code	ø 4,10/4,70 Codice /Code		
	ANALOGO / ANALOGUE	BOLAN3	BOLAN4		
	TRANSFER / TRANSFER	BOLCO-3	BOLCO-4		
	VITE DI GUARIGIONE HEALING ABUTMENT				
	H.3	BOLVG3-3	BOLVG4-3		
	H.4	BOLVG3-4	BOLVG4-4		
	H.5	BOLVG3-5	BOLVG4-5		
	MONCONI DRITTI STRAIGHT ABUTMENT				
	H.2	BOLMT33-2	BOLMT47-2		
	MONCONI ANGOLATI ANGLED ABUTMENT				
	17°	BOLMT3317	BOLMT4717		
	VITE / SCREW	DP-13BOL	DP-13BOL		

DENTAL PLANET Sas web-site: www.dental-planet.it e-mail: info@dental-planet.it

Accessori compatibili con:
Accessories compatible with:

STRAUMANN[®]
TISSUE LEVEL



Altre compatibilità:
other compatibility:

GEASS[®] WAY[®] ROMA




Accessori / <i>Accessories</i>		ø 4,8 Codice / <i>Code</i>			
	ANALOGO / ANALOGUE	MAXX5022			
	TRANSFER / TRANSFER	MAXX48CO			
	VITE DI GUARIGIONE HEALING ABUTMENT				
	H.2	MAXX5001			
	H.3	MAXX5002			
	H.4	MAXX5003			
	MONCONE DRITTO ANATOMICO ANATOMICAL STRAIGHT ABUTMENT	MAXX5007-L			
	MONCONE DRITTO FRESABILE MILLABLE STRAIGHT ABUTMENT	MAXX5008			
	MONCONI ANGOLATI ANGLED ABUTMENT				
	15°	MAXX5017			
	25°	MAXX5025			
	VITE / SCREW	MAXX5016			

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 4,8 Codice /Code			
	MONCONE PROVVISORIO TEMPORARY ABUTMENT				
	ROTANTE / ROTATING NON ROTANTE / NO ROTATING	MAXX5035-R MAXX5035			
	MONCONE PER INCOLLAGGIO ABUTMENT FOR BONDING				
	ROTANTE / ROTATING NON ROTANTE / NO ROTATING	MAXX48CI-R MAXX48CI			
	CALCINABILE / CASTABLE				
	ROTANTE / ROTATING NON ROTANTE / NO ROTATING	MAXX5004-R MAXX5004			
	CALCINABILE CR/CO CR/CO CASTABLE				
	ROTANTE / ROTATING NON ROTANTE / NO ROTATING	MAXX48CR-R MAXX48CR			
	OVERLOC				
	H.1	STR-480/1			
	H.2	STR-480/2			
	H.3	STR-480/3			


Accessori compatibili
FUORI PRODUZIONE
disponibili fino ad esaurimento

Compatible Accessories
OUT OF PRODUCTION
accessories available to end of stock





CAMLOG[®]
GLOBAL[®]
WINSIX[®]
ASTRATECH[®] Ø 3,0

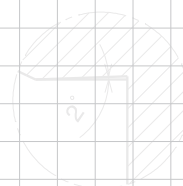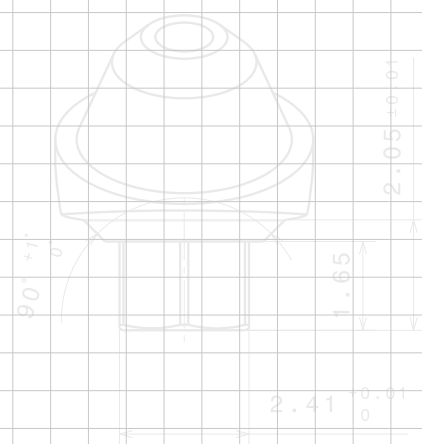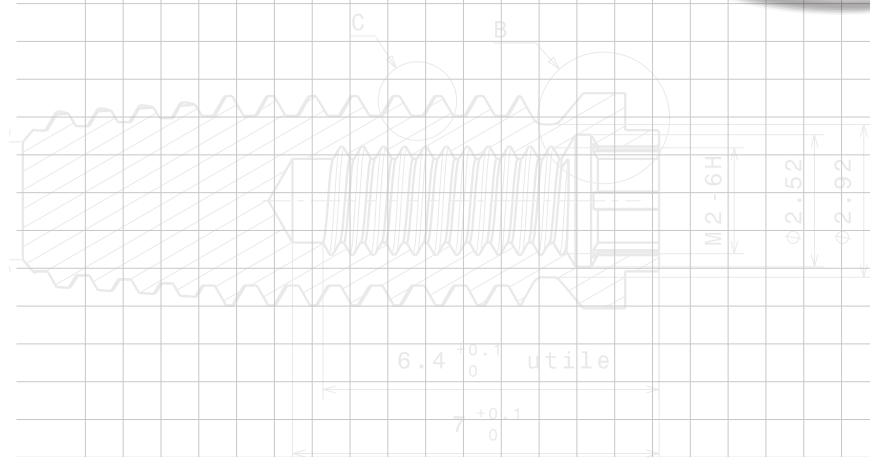


Dettaglio C
Scala: 20:1


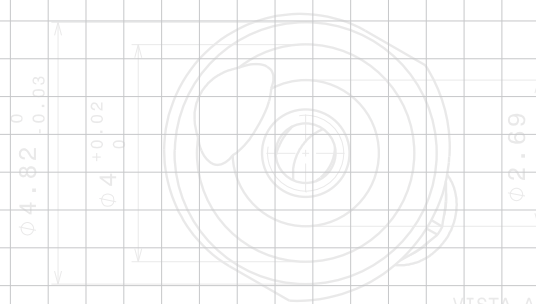


Dettaglio C
Scala: 15:1

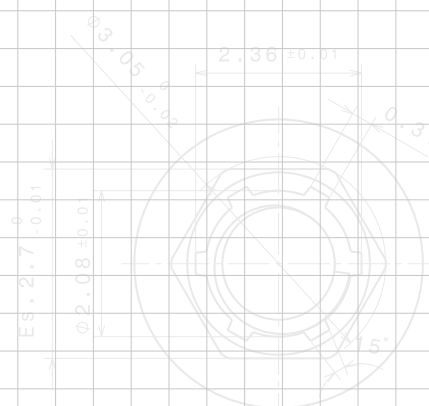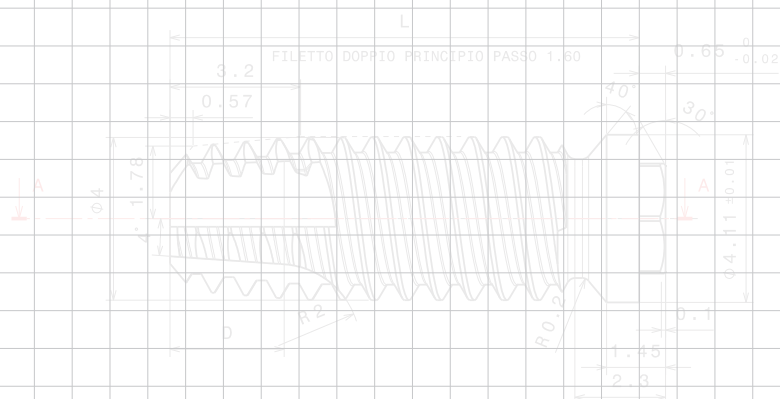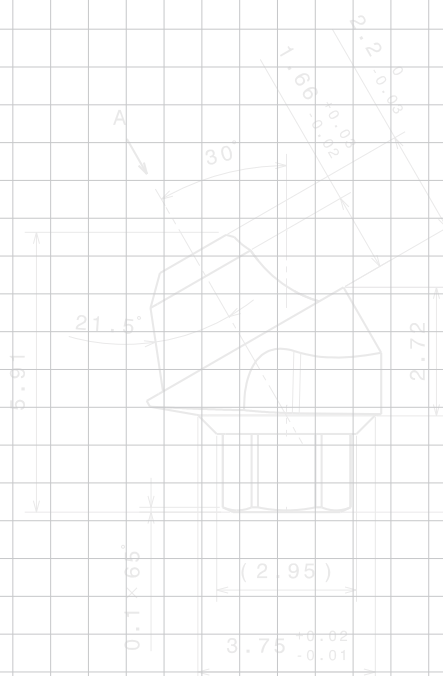
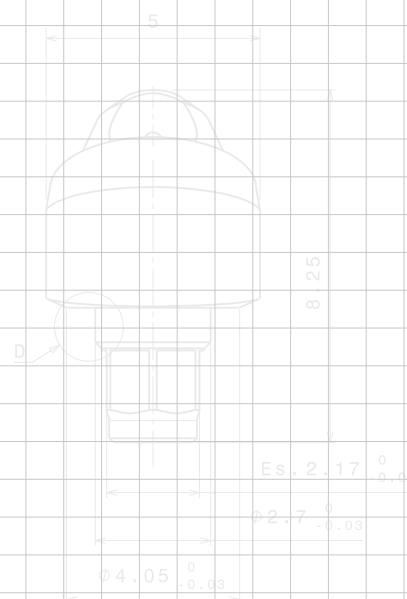





VITE 859

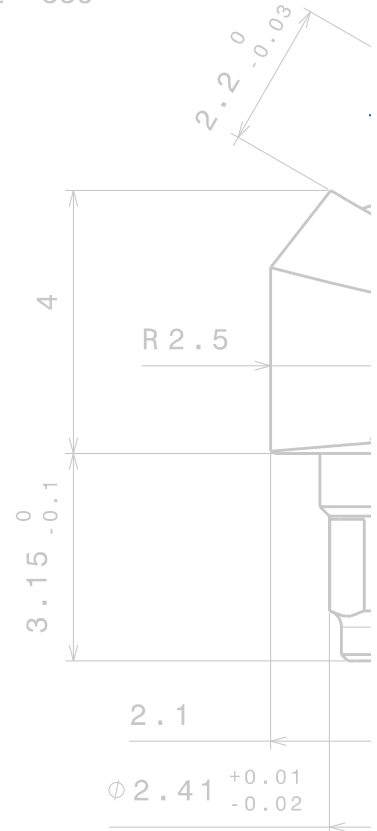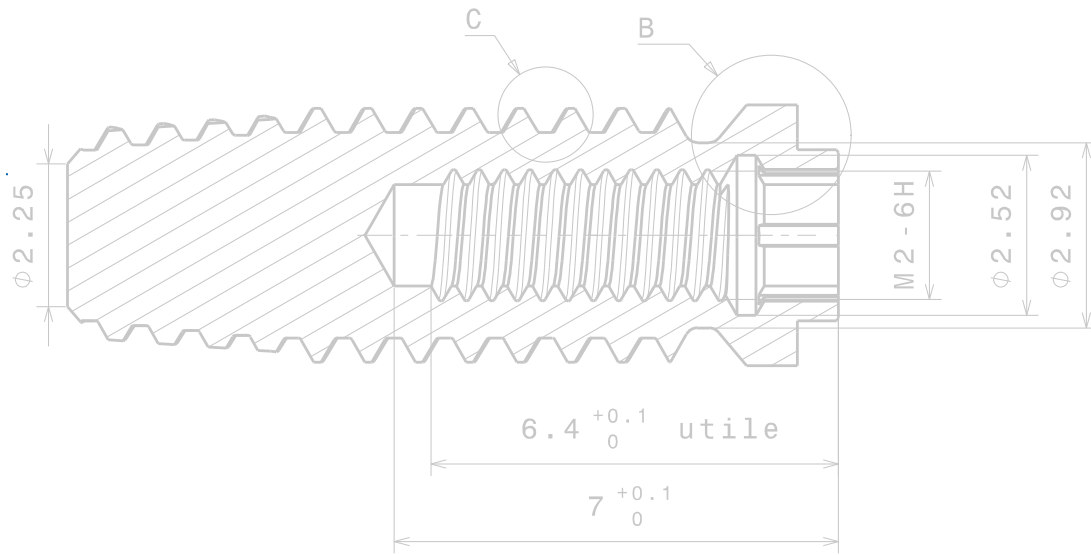

Dettaglio B
Scala: 15:1

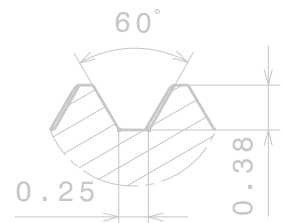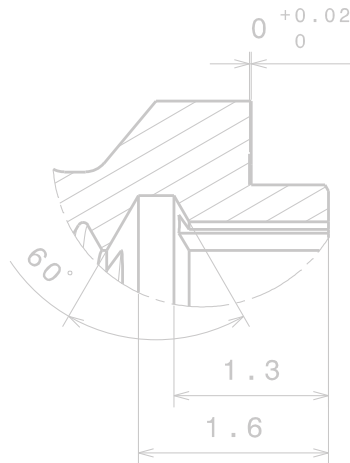

Dettaglio C
Scala: 15:1

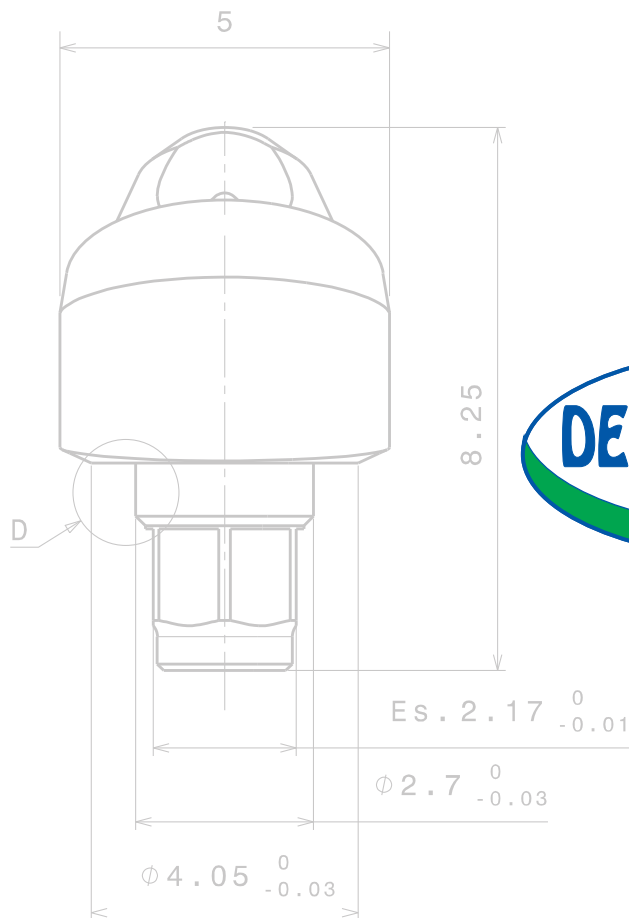

IMPLANT COMPANY

RIVENDITORE DI ZONA :

Dental Planet s.a.s


Via Imola, 90/B - 41125 Modena - I

Tel. +39 059 395336

Sito: www.dental-planet.it

E-mail: info@dental-planet.it

Dettaglio D
Scala: 20:1

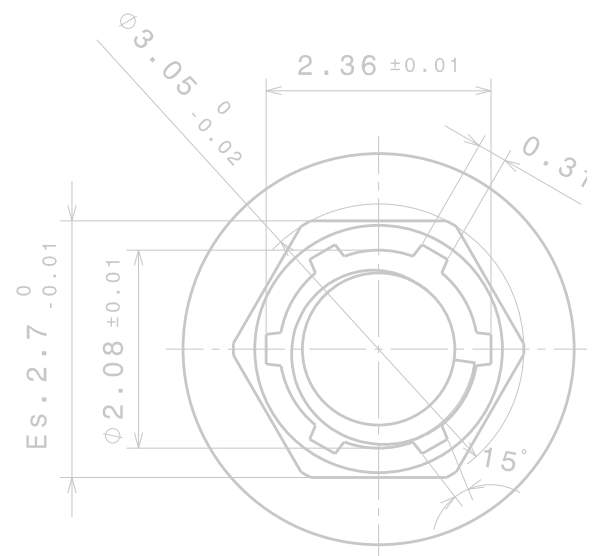

Rev. 01 /19

Rev. 01 /19